

ageLOC.

WellSpa iO™



取 扱 説 明 書

# 目次

1 ご使用の前に	3
2 セットに含まれているものと各部の名称	5
3 充電方法	6
4 ageLOC ウェルスパ iOをアプリに接続	6
5 ageLOC ウェルスパ iOのペアリングの手順	7
6 ご使用方法	8
7 ageLOC ウェルスパ iOのお掃除方法	10
8 廃棄の際のご注意	11
9 仕様・その他	11
10 ageLOC ウェルスパ iO本体・充電器 保証書	12

# 1 ご使用の前に

ageLOC ウェルスパ iO を使用される前に、以下の使用上の注意事項を必ずお読みください。

- 子どもが保護者の監督なしに本製品を使用し、火傷、感電、けが、小部品の飲み込み等のないように注意してください。
- 子どものいるところで使用する場合は、十分注意してください。
- 子どもが本製品で遊ばないように注意してください。
- 取り扱いに不慣れな方だけでは使用しないでください。
- ワイヤレス充電器は水場を避けて設置してください。

## 安全上のご注意

- ◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ◆注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



使用者が重傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合。



この記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。



この記号は、強制（必ず守ること）を示します。



警告

- 次のような方は使用を避けてください。
  - 熱感を自覚できない方
  - アレルギー体質（金属アレルギーを含む）、皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
  - 生理中、妊娠中および産後間もない方
- 下記の場合や部位には使用しないでください。
  - 心臓の上や陰部、粘膜の部位
  - 体調が優れない場合
  - 飲酒や薬を服用中の場合、疲労の激しい場合
  - 肌や身体に痛みや異常を感じる場合
  - ペースメーカーを装着している場合、てんかんの場合、ボディピアスをしている場合
  - 皮膚炎、過度の日焼け、傷やしっしん、はれものなどの皮膚に異常のある部位、ほくろが盛り上がっている部位
  - 当日に脱毛処理をした部位
- ワイヤレス充電器は浴室・シャワー室など湿気の多いところで使用や保管をしないでください。
- 充電時は10℃～27℃の環境、保管場所は5℃～30℃を目安としてください。
- 極端な高温になる場所を避け、直射日光に当たらないようにしてください。機器内部の損傷を招き、動作の劣化を早めます。
- めれた手でワイヤレス充電器のUSBケーブルを抜き差ししないでください。また、水などでぬらさないでください。
- たこ足配線をしないでください。
- ワイヤレス充電器のコードが曲がっていたり、汚れていたり、傷んでいるときは使用しないでください。
- 収納時に電源コードを本体に巻き付けしないでください。
- 製品の分解はしないでください。
- 製品の改造・修理はしないでください。
- バッテリーの充電には、付属の専用充電器のみを使用してください。
- 本製品をボディのお手入れ以外の目的には使用しないでください。
- 火中投入、加熱しないでください。
- 高温の車内に放置しないでください。
- 電池を交換しないでください（本製品には交換が不可能な電池を含んでいます）。
- 本製品は、取扱説明書に記載された範囲内でのみ使用してください。
- 破損した本製品を飛行機に持ち込まないでください（航空貨物として送らないでください）。
- ① 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ① ワイヤレス充電器のほこりを定期的に取り除いてください。
- ① 使用後や充電時以外はワイヤレス充電器のUSBケーブルを抜いてください。
- ① 本製品を使用して異常が生じた場合には、医療機関に相談してください。



注意

- ワイヤレス充電器のUSBケーブルを抜くときは、電源コードを持って抜かないでください。
  - 落としたりぶつけたりしないでください。
  - 専用の化粧品以外使用しないでください。
  - 肌に強く押しつけないでください。
  - 同じ部位に長時間連続で使用しないでください。
  - ほかの方と本体を共有する場合は、湿った布で本体をお掃除してからご使用ください。
  - 充電するときには、安定した熱の伝わりにくい場所で行ってください。
  - ① 本体をお掃除するときには、シンナー、ベンジン、灯油などの溶剤や薬品類、研磨剤などは使用しないでください。
  - ① ご使用前に本製品に割れ、欠け、変形などの破損がないか確認してください。
  - ① 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
  - ① 開封時にけがのないようにお取り扱いにご注意ください。
  - ① 使用可能部位（頭、顔、首、デコルテ、胸、脚の付け根などの敏感な部分をのぞく）にのみで使用ください。
  - ① 家庭用電源AC100-240Vに接続してください。
  - ① 異常な音やにおいがした場合、直ちにワイヤレス充電器のUSBケーブルを抜き、使用を中止してください。
- ※海外でご使用の場合、電力供給が安定していない地域では正常に使用できない場合があります。

## 2 セットに含まれているものと各部の名称




ご使用を始める前に、すべての付属品が揃っていることをご確認ください。

- ageLOC® ウェルスパ iO™ 本体 1個
- ワイヤレス充電器 (USB接続) 1個
- スタートガイド 1部


- ・ ageLOC ウェルスパ iO でのお手入れに必要な専用化粧品は別売りです。
- ・ USBアダプターは含まれていません。



### 各部の名称

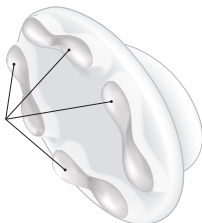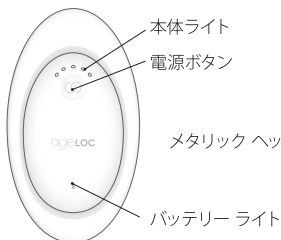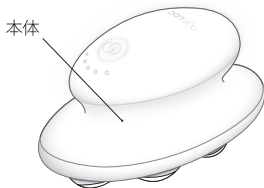

### 3 充電方法

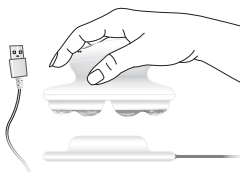

- 必ず ageLOC ウェルspa iO本体が完全に乾いていることを確認してから、ワイヤレス充電器にセットしてください。
- USB ケーブルを電源に繋ぎ、本体をワイヤレス充電器の上にセットして完全に充電されるまで充電（フル充電）してください。
- 本体を充電している間は、バッテリーライトがゆっくり緑色に点滅します。フル充電になるとライトが緑色に点灯したままの状態になります。
- お手入れをしないときやフル充電後は、USB ケーブルを電源から抜いてください。



- ・電池残量が極端に少なくなるとバッテリーライトが黄色に点滅し、本体の電源が入らなくなります。
- ・バッテリーライトがまったく光っていない場合は、充電を開始すると緑色に点滅した状態になります。

### 4 ageLOC ウェルspa iO をアプリに接続

ageLOC ウェルspa iO のすべての機能を体験するには、Apple App StoreまたはGoogle Play ストアから専用アプリ「Nu Skin Vera」をダウンロードします。



App StoreおよびApple ロゴは、米国およびその他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。Google Playは、Google LLCの商標です。

## 5 ageLOC ウェルスパ iO の ペアリングの手順

1. 専用アプリ「Nu Skin Vera」をダウンロードしてください。
2. Bluetooth®\*がオンになっていることを確認してください。
3. 「Nu Skin Vera」にサインインしてください。
  - ニュースキンのアカウントをすでにおもちの場合は、そのアカウントを使ってサインインしてください。
  - ニュースキンのアカウントをおもちでない場合は、新規会員登録を行ってください。  
お手続きは簡単です。
4. アプリの「本体」をタップしてください。
5. 「本体とペアリングする」をタップしてください。
6. 本体の電源が切れた状態で、電源ボタンを押して電源を入れてください。
7. 「接続する」をタップしてください。
8. ペアリングする本体を選択してください。
9. 選択が完了するとペアリングが行われます。

\*Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。  
NSE Products, Inc.は、使用許諾を得てこれらのマークおよびロゴを使用しています。  
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

## 6 ご使用方法

ageLOC ウェルスパioは、毎日のお手入れにも、週3回を目安にしたスペシャルケアとしてもお使いいただけます。

### ステップ1

#### 専用セラムまたは専用ジェルをなじませる

お手入れする部位にセラムまたはジェルをやや多めにのばします。頭、顔、首、デコルテ、胸、脚の付け根などの敏感な部位は避けるようにしてください。



- 複数の部位をお手入れする場合は一度にすべての部位に塗るのではなく、すぐにお手入れする部位だけにその都度塗ります。
- セラムまたはジェルの量が足りないと、本体が停止することがあります。必要に応じてセラムまたはジェルを足してください。

### ステップ2

#### お手入れを開始する

電源ボタンを押して電源を入れます。

電源を入れると、5つすべての本体ライトが点灯します。

お手入れを開始するには、セラムまたはジェルをなじませた部位に本体を当ててください。音が鳴り、お手入れが自動的に始まります。



- 点灯している本体ライトの数はお手入れ時間を表しています。
- 電源ボタンを押すたびにお手入れ時間が変わるので、ご希望の時間になるまで電源ボタンを押してください。5分間、4分間、3分間、2分間、1分間から選べます。ボタンを押すときは、メタリックヘッドに触れないようにして、お手入れ前に行ってください。
- 次にお手入れする際には、今回選んだ時間が反映されます。




### ステップ 3

#### 本体を肌の上で動かしてお手入れする

本体を肌の上で軽くすべさせます。頭、顔、首、デコルテ、胸、脚の付け根などの敏感な部位は避けるようにしてください。1分経過するごとに音が鳴り、本体ライトが1つ消えていきます。

- 部位ごとのお手入れの詳細については、専用アプリ「Nu Skin Vera」をご覧ください。

<各部位のイメージ>

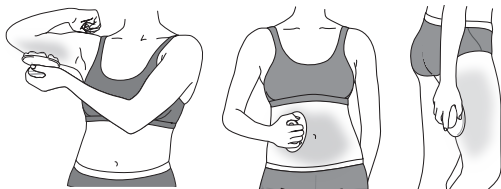

- 本体ライトが消えるまで電源ボタンを長押しすると、いつでも電源を切ることができます。



- 本体のメタリックヘッドが肌から離れると、微弱電流は流れず、本体が自動的に停止して音が鳴ります。お手入れを再開するには、メタリックヘッドを肌に当ててください。
- セラムまたはジェルの量が足りないために、微弱電流が流れず、本体が自動的に停止して音が鳴ることがあります。その場合は、さらに塗り足し、本体がなめらかに動くことを確認してください。
- 本体を速く動かすと、警告音が鳴ります。適切な速度で動かしてください。

## ステップ 4

### お手入れを完了する

お手入れが完了すると音が鳴り、自動的に電源が切れます。肌に残ったセラムまたはジェルは、マッサージするように肌になじませてください。



ヒント

手動で電源を切った際も同じ音が鳴ります。

## 7 ageLOC ウェルスパ iO のお掃除方法

お手入れのあとは、毎回以下のようにお掃除をしてください。

- 湿った布で、本体とワイヤレス充電器に残ったセラムまたはジェルを拭き取ります。
- よく乾かしてから風通しのよい場所に保管してください。



注意

本体とワイヤレス充電器を水や液体に浸けないでください。

## 8 廃棄の際のご注意

### ■廃棄する際のお願い

本製品を廃棄する場合は、自治体の分別ルールにしたがって廃棄してください。本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

### ■本製品の使用電池

名称：リチウムイオン電池  
公称電圧：DC3.6V  
3.6 V x 0.75 Ah = 2.7 Wh  
数量：1



- 充電残量がある場合は、電池を使いきってください。

## 9 仕様・その他

品名	ageLOC® ウェルスパ iO™
電源方式	充電式
定格電圧	22V
質量	約190g
消費電力	約0.014W

品名	ワイヤレス充電器
電源端子	micro USB
入力電圧	5V/0.5A
出力電力	2.5W
コードの長さ	約1m

### (1) 保証書

- 保証書は、必ず「ブランドメンバー（販売員）名・お買い上げ日」等の記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
  - 保証書は本書に明示されている期間・条件のもと、無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- (2) 保証内容は製品の交換のみです（本体の構造上、修理はできません）。
  - (3) 保証期間はお買い上げ日から2年間です。
  - (4) 保証期間中に不具合が生じた場合は、お求めの販売員へ保証書を添えて製品をお渡しください。
  - (5) 保証期間中の不具合とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お求めの販売員へお問い合わせください。
  - (6) 保証期間を過ぎた場合は無料保証の対象外です。

# 10 ageLOC ウェルスパ iO 本体・ ワイヤレス充電器 保証書

本書は、お買い上げから保証期間中に不具合が生じた場合に、下記の保証規定内容により保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に不具合が生じた場合は、ニュースキンジャパン株式会社（フリーダイヤル：0120-200-449）へお問い合わせください。

製品名	ageLOC® ウェルスパ iO™ 本体・ワイヤレス充電器		
保証期間	本体お買い上げ日より2年間		
お買い上げ日(*注)	年	月	日
お名前			
電話番号			

ブランドメンバー番号

ブランドメンバー名

## 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に不具合が生じた場合にはニュースキンジャパン株式会社が無料保証します。
- 保証内容は製品の交換のみとなります（本体の構造上、修理はできません）。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日(\*注)、お客様名、ブランドメンバー（販売員）名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 誤った使用法、不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害による故障および損傷。
  - 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
  - 一般家庭用以外の使用による故障および損傷。
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(\*注) 販売員のお買い上げ日は、現金領収書およびカード利用明細書もしくは納品書の日付、お客様お買い上げ日は、製品購入契約書（領収書）の日付となります。これらの書類はお買い上げ日を証明するものになりますので、併せて保管してください。

ニュースキンジャパン株式会社 [www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)

NU SKIN.

東京都港区虎ノ門 1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア14階  
お問い合わせ先：0120-200-449（固定電話専用）

本誌に掲載されているすべてのものに関して、無断転載・複製を禁じます。

©2023 Nu Skin Enterprises, Inc. Nu Skin Japan Co., Ltd. NSE Products, Inc. 94515629/1